


polaris

since 1995

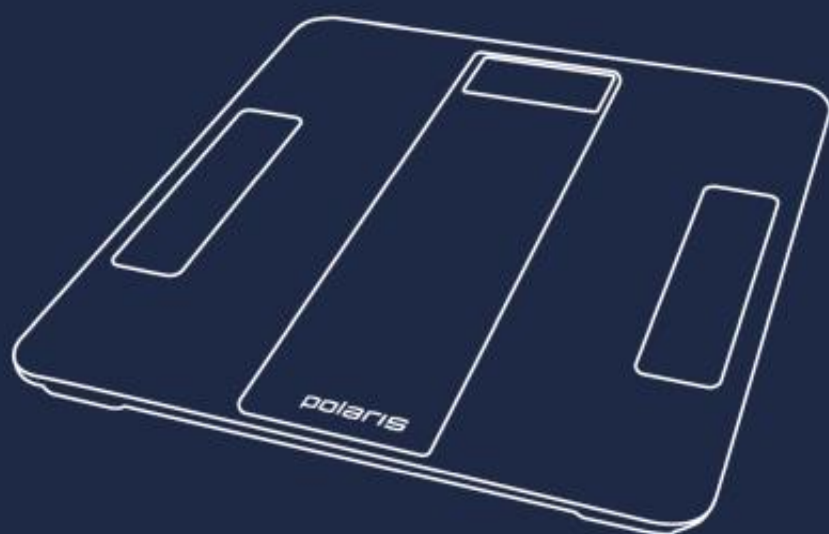

PWS 1860DGF

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания по безопасности	4
Сфера использования	5
Комплектация	5
Принцип работы	5
Описание прибора	6
Описание дисплея	7
Подготовка к работе и использование	7
Установка элементов питания	7
Выбор единиц измерения	8
Простое взвешивание	8
Определение процентного содержания жира / воды / мышечной и костной массы/ индекса массы тела	9
1. Ввод личных данных	9
2. Начало измерений	10
3. Автоматическое распознавание пользователя	13
4. Повторное считывание измерение	14
Сообщения об ошибках	14
Чистка и уход	15
Транспортировка и хранение	15
Требования по утилизации	16
Неисправности и их устранение	16
Технические характеристики	16
Реализация	17
Информация о сертификации	17
Гарантийные обязательства	18

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное Руководство.
- Использование анализатора избыточного веса противопоказано:
 - Беременным женщинам;
 - Лицам, имеющим имплантированные электрокардиостимуляторы, так как принцип действия прибора основан на протекании через тело человека электрического тока, который может вызвать сбой в работе кардиостимулятора;
 - Лицам, проходящим лечение диализом.
 - Лицам, страдающим отеками
 - Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Используйте прибор только по назначению.
- Размещайте весы на ровной, твёрдой, сухой и нескользкой горизонтальной поверхности. Во избежание погрешностей при взвешивании не используйте весы на линолеуме или ковровых покрытиях.
- Влажная поверхность платформы может быть скользкой – протирайте весы сухой тканью перед использованием.
- Запрещается использовать и хранить весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Во избежание повреждения тензодатчиков – не прыгайте на платформу и не бросайте на весы тяжелые предметы. Наступайте на весы аккуратно, с осторожностью.
- Перед взвешиванием снимите обувь и носки, взвешивание проводите, стоя на весах босыми ногами.
- Пока происходит взвешивание, стойте на весах неподвижно.
- Используйте весы вдали от нагревательных приборов и от сильных электромагнитных излучений.
- При неиспользовании весов в течение длительного периода необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) центр.
- Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Устройство не предназначено для использования в коммерческих или медицинских целях.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.
- Основной функцией прибора является определение веса взрослого (старше шести лет) человека в условиях температуры и влажности жилого помещения.
- Использование вне помещений не предусмотрено.
- Следует учитывать, что показатели жира в организме могут изменяться в течение дня (меняться после приема ванны или душа, после приема пищи или жидкости, во время болезни или во время физических нагрузок).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

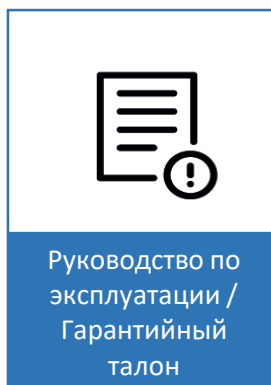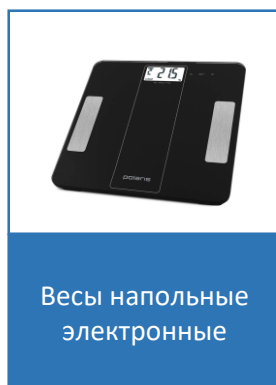

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В основе работы данных весов лежит принцип анализа биоэлектрического сопротивления (В.І.А.). Определение процентного соотношения содержания в организме человека различных тканей происходит с помощью неощутимого человеком, безопасного низковольтного электрического тока. Различные ткани в организме человека имеют разную электропроводность: для мышечной ткани и воды характерна хорошая электропроводность, кости и жировая ткань, обладают низкой электропроводностью. Таким образом, используя результат измерения электрического сопротивления, ряда показателей человеческого организма и индивидуальных характеристик человека (возраст, рост, пол), можно определить процентное содержание жировой ткани и другие параметры человеческого тела.


Следует иметь в виду, что значения, полученные при использовании данных весов, представляют собой лишь приблизительные, неточные данные.

Например, мышечная ткань также содержит определенный процент воды, которая учитывается при измерении мышечной ткани в организме, что может привести к тому, что общий процент измеряемых тканей составит более 100%. Точные измерения соотношения тканей в организме может произвести только врач-специалист, проведя ряд медицинских исследований и анализов (например, посредством компьютерной томографии).

Недостоверные результаты могут возникнуть:

- у людей, испытывающих жар, страдающих отеками и остеопорозом,
- у людей, проходящих лечение диализом,
- у людей, принимающих кардиоваскулярные препараты
- у беременных женщин
- у профессиональных спортсменов

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

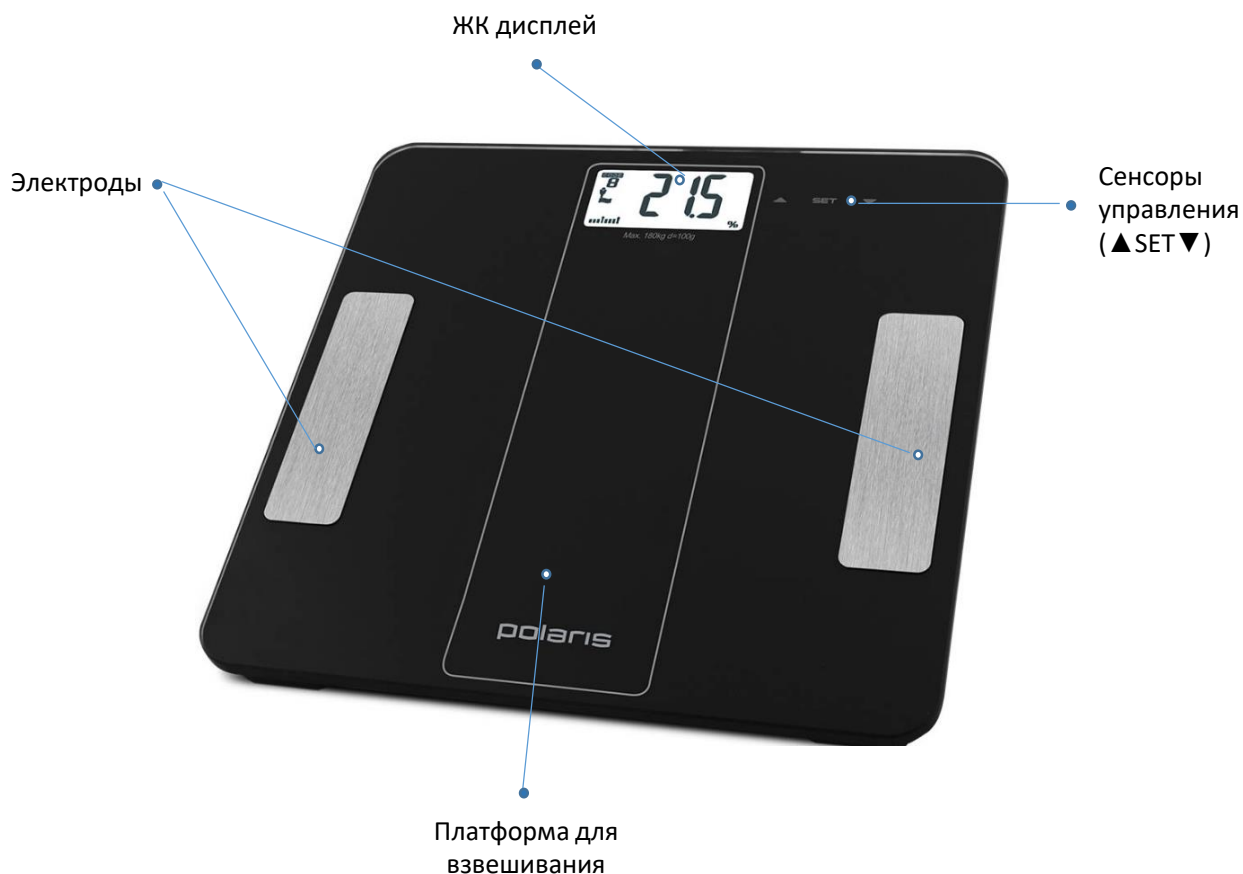

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ



% Жира	% Костной массы	% Мышечной массы
Недостаток	Недостаток	Нормальный
Избыток	Избыток	


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка элементов питания

- Откройте крышку отсека для батареек.
- Вставьте 2 батарейки «AAA» (2x1,5В) в батарейный отсек, строго соблюдая полярность.
- Закройте крышку батарейного отсека.



Внимание! При установке батареек соблюдайте полярность.

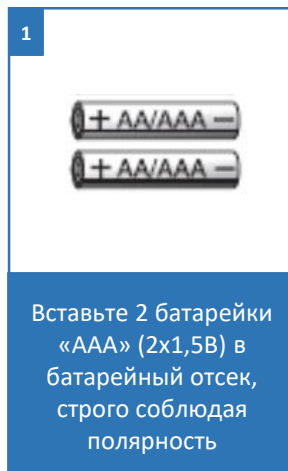

Выбор единиц измерения

При необходимости изменить меру веса (kg – килограммы, lb – фунты), используйте кнопку «Unit», расположенную на дне рядом с батарейным отсеком (для модификаций с возможностью выбора меры веса).




Простое взвешивание

1. Установите весы на твердую, горизонтальную поверхность.
2. Наступите в центр весов, они автоматически включатся, на дисплее отобразится «0.0 kg»
3. Встаньте на весы, через несколько секунд на дисплее отобразится Ваш вес.
4. Цифры на дисплее начнут мигать, значение зафиксировается.
5. Сойдите с платформы, весы автоматически отключатся через несколько секунд.



Внимание! Для автоматического включения весов масса нагрузки должна превышать 5кг. Вес менее 5 кг прибором не фиксируется и не индицируется на дисплее. Если в течение 25 секунд после включения прибора не произведено взвешивание, весы автоматически отключаются.

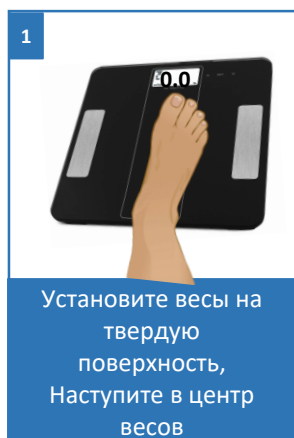

Определение процентного содержания жира / воды / мышечной и костной массы/ индекса массы тела

1. Ввод личных данных

1. При первом включение установлены следующие параметры пользователя

ПАМЯТЬ	ПОЛ	РОСТ	ВОРАСТ
1	Мужчина	165 см	25 лет

Параметры могут быть выбраны в следующем диапазоне:

ПАМЯТЬ	ПОЛ	РОСТ	ВОРАСТ
1 -12 (возможен ввод данных 12 пользователей)	Мужчина Женщина	100 – 250 см	10 – 100 лет

1. Для ввода личных параметров нажмите сенсор **SET** (слева от дисплея)
2. Выберите код пользователя (от 1 до 12) сенсорами ▲ и ▼. Нажмите SET, чтобы зафиксировать значение и перейти к установке пола пользователя.
3. Нажмите кнопки ▲ и ▼ для выбора пола. Нажмите SET, чтобы зафиксировать значение и перейти к установке значения роста пользователя.
4. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите рост пользователя. Нажмите SET, чтобы зафиксировать значение и перейти к установке возраста пользователя.
5. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите возраст. Коснитесь платформы весов. Значения личных параметров зафиксируется и на дисплее отобразится «0.0».
6. Весы отключатся через несколько секунд.



Примечание! Переключение между параметрами производится с помощью сенсора **SET**.



2. Начало измерений



Внимание! Данные о процентном содержании воды, жира, мышечной и костной массы могут быть получены только в том случае, если вы стоите на весах босиком.

Пример: 3-й пользователь, женщина, 168 см, 28 лет.

1. Включите весы. На дисплее отобразятся параметры последнего пользователя.
2. Выберите нужный номер пользователя с помощью сенсоров ▲ и ▼. На дисплее высветятся ваши персональные данные.
3. Коснитесь платформы в центре и на дисплее отобразится «0.0 kg».




Примечание! Не вставляйте на платформу до появления на дисплее «0.0 kg».

4. Встаньте ровно на весы босыми ногами на оба электрода.



Внимание! Стопы должны полностью покрывать электроды!

5. Значение веса зафиксируется.
6. Не сходите с весов, пока дисплей устанавливает и записывает результаты измерений. На дисплее выводится изображение «0000».
7. После установки измерений ЖК-дисплей будет отображать: Вес, % Жира, % Воды, %Костей, % Мышц и рекомендуемые калории поочередно 3 раза.

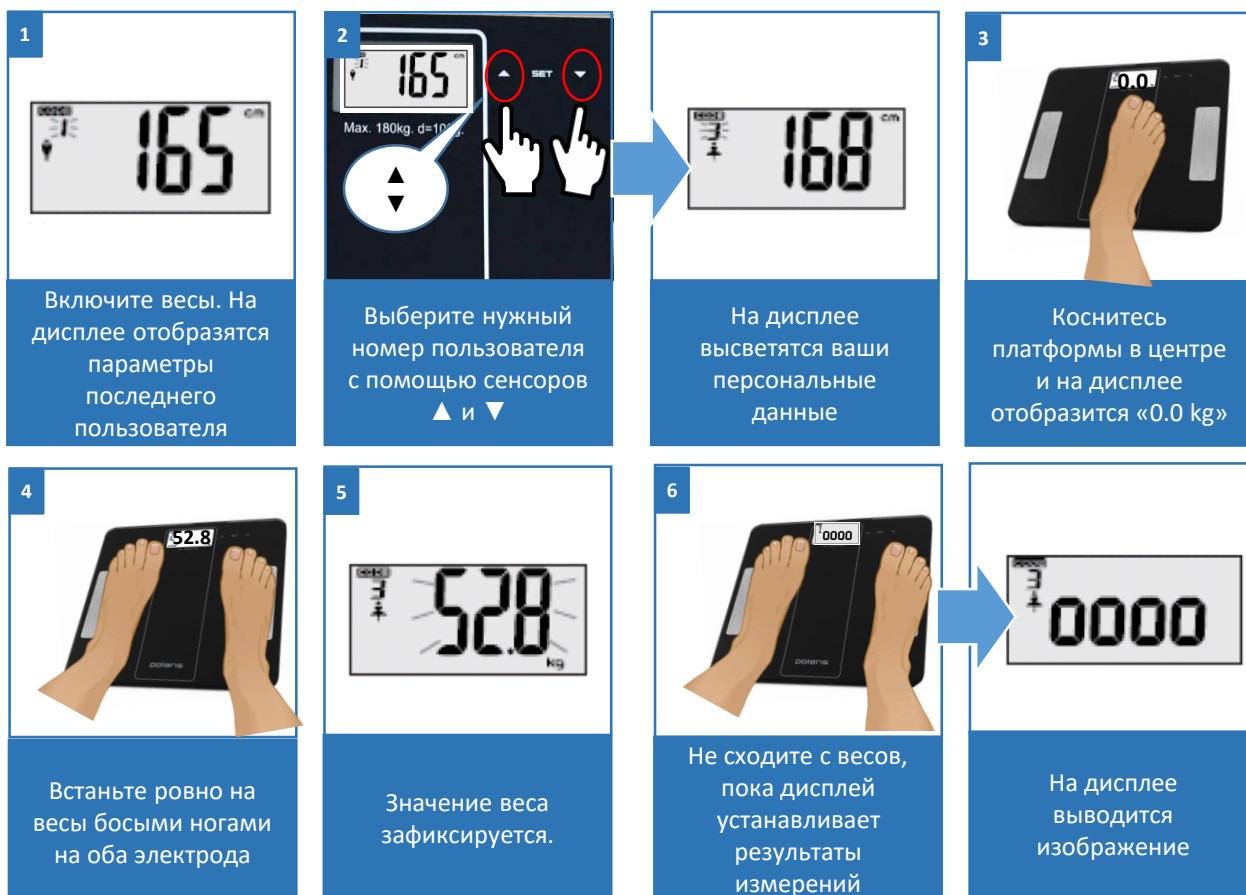




Процентное содержание воды, жира, мышечной и костной массы в организме – это количество воды, жира, мышечной и костной массы в процентах к общему весу.

Показатель калорий отображает рекомендованный уровень дневной затраты калорий для Вашего организма.

При индикации на дисплее рассчитанных параметров, на шкале индикатора типа телосложения отображается примерное соответствие этих параметров норме для данного веса роста и возраста.

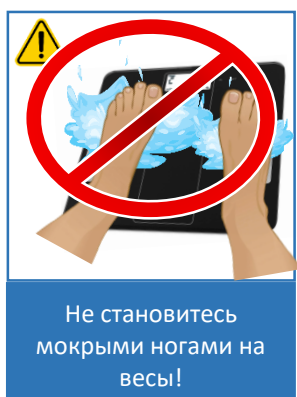

Внимание! Перед использованием убедитесь, что верхняя поверхность весов и ваши ноги сухие. Не становитесь мокрыми ногами на весы!

Показатель % жировой массы

Показатель % жира — это показатель % содержания жира в организме человека, который должен находиться на определенном уровне, в то время, как переизбыток жира будет оказывать негативное влияние на обмен веществ.

Принцип работы

При прохождении электрического сигнала определенной частоты через тело человека, производится измерение соотношения жировой массы по принципу того, что импеданс жира выше, чем у мышц или других тканей человека. Благодаря использованию анализа биологической устойчивости это устройство использует безопасную частоту электрического тока низкого напряжения, пропуская через тело человека, таким образом, % жира будет отражаться в соответствии с различиями в сопротивлении, при передаче электрического сигнала, передаваемого через тело человека.

Таблица оценки содержания жира/воды

После взвешивания вы можете использовать для справки следующую оценочную таблицу:

ВОЗРАСТ	ПОЛ	% ЖИРА				
		Недостаток	Худой	Норма	Выше среднего	Избыток
		i - -	i -	i	i +	i ++
≤ 30	Мужской	≤ 11%	11,1 – 15,5%	15,6-20%	20.1-24.5%	> 24.5%
	Женский	≤ 16%	16,1-20,5%	20,6-25%	25.1-30.5%	> 30.5%
> 30	Мужской	≤ 15%	15,1-19,5%	19.6-24%	24.1-28.5%	> 28.5%
	Женский	≤ 20%	20,1-25%	25.1-30%	30.1-35.5%	> 35%

ПОЛ	ВОЗРАСТ	% ЖИДКОСТИ		
		НИЗКИЙ %	НОРМАЛЬНЫЙ %	ВЫСОКИЙ %
МУЖСКОЙ	< 40	< 50	50 – 65	> 65
	40 – 60	< 48,5	48,5 – 63,5	> 63,5
	> 60	< 47	47 – 62	> 62
ЖЕНСКИЙ	< 40	< 45	45 – 60	> 60
	40 – 60	< 43,5	43,5 – 58,5	> 58,5
	< 60	< 42	42 - 57	> 57

* Вышеуказанная информация приведена только для справки

3. Автоматическое распознавание пользователя

Измерения сохраняются в памяти прибора под соответствующим кодом пользователя.

- Когда весы выключены или находятся в режиме ожидания, встаньте на весы.
- Если весы смогут выявить аналогичное значение веса (разница в значениях ± 2 кг), на ЖК-дисплее один раз мигнет значение взвешивания и отобразится код пользователя.
- Весы автоматически распознают текущего пользователя и его вес, а также другие данные, такие как жировые отложения, % воды и т. д.
- Если распознать пользователя не удалось, то весы покажут вес и автоматически выключатся, спустя 4-7 сек.

Измерения сохраняются в памяти прибора под соответствующим кодом пользователя.






Примечание:



Если весы обнаружат два или более одинаковых значения веса, то выбор пользователя будет произведен с ближайшим значением веса. Если весы обнаружат два одинаковых значения веса, то будет выбран код пользователя, который является первым.



ВНИМАНИЕ! Весы предназначены только для бытового семейного использования, данное устройство не подходит для профессионального использования. Результаты измерения массы тела, ИМТ, процентного содержания жира, воды, мышц в организме, костной массы, стандартного веса и степени ожирения предназначены только для справочных целей. Прежде чем перейти на какую-либо диету или начать тренироваться по какой-либо программе упражнений, вам следует проконсультироваться с врачом.

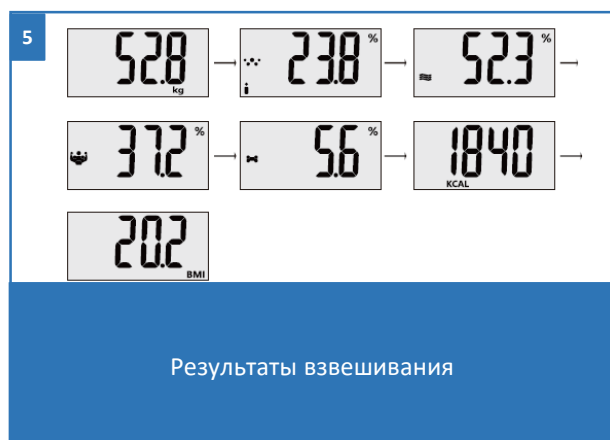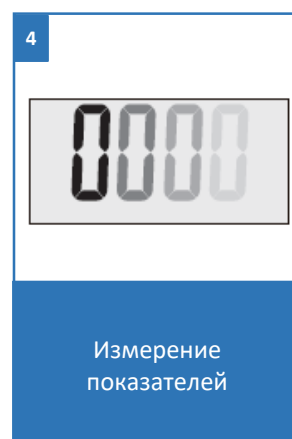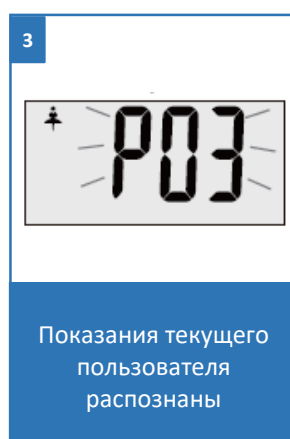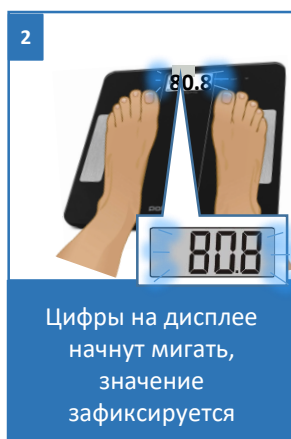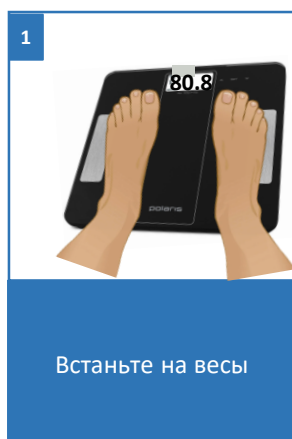


4. Повторное считывание измерений

Измерения сохраняются в памяти прибора под соответствующим кодом пользователя.

Для их повторного считывания:

- включите весы, нажав на сенсор SET
- сенсорами ▲ и ▼ выберите соответствующий код пользователя.
- подождите 6 секунд или нажмите на середину платформы. На дисплее отобразится «0.0 kg».
- нажмите сенсор ▲, чтобы перейти в режим повторного считывания измерений.
- Значение измерений отобразятся на экране 3 раза , после этого весы отключатся автоматически.

После следующего взвешивания результаты предыдущих измерений удаляются из памяти прибора.

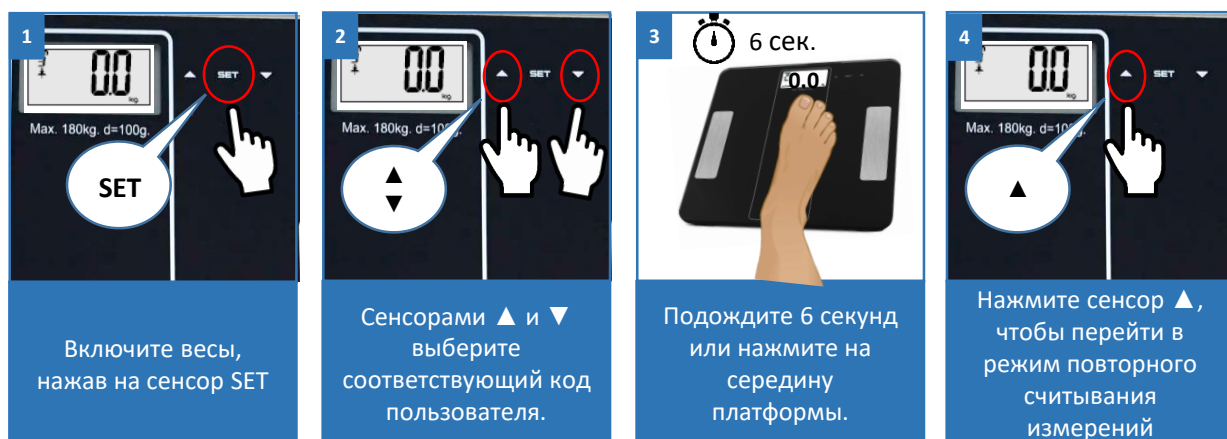

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

«LO» - низкий заряд батареи, необходимо заменить батарею.

«Err» - индикатор превышения допустимого веса. Необходимо сойти с платформы во избежание поломки.

« [» - ошибка программы. Повторите операцию еще раз.



«ErrL» - индикация слишком низкого содержания жировой массы в организме.

«Errh» - индикация слишком высокого содержания жировой массы в организме.

Соблюдайте диету для поддержания здоровья.

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью. Не мойте весы под краном и не окунайте их в воду, это приведет к поломке.
- Защищайте весы от ударов, влаги, пыли, химических веществ и экстремальных колебаний температуры. Храните прибор вдали от источников тепла (печи, отопительные приборы);
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.
- Если после включения прибора на экране ничего не отображается, то замените батарейки, если необходимо. Если эти действия не помогли, обратитесь в службу поддержки.

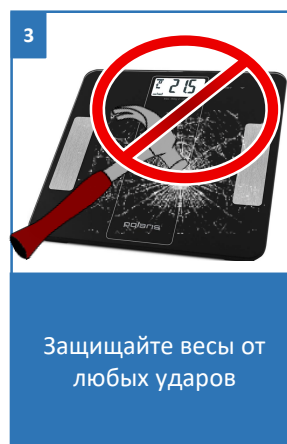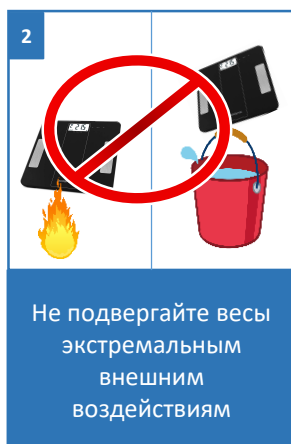

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Весы не работают	Весы не включены Замените элементы питания	Включите весы
	Емкость элементов питания иссякла	Замените элементы питания
Показания дисплея не соответствуют истинному значению	Выбрана неверная единица измерения	С помощью сенсора выберите необходимую единицу измерения. Для получения точного значения веса необходимо соблюдать ряд условий: - устанавливайте весы только на ровную горизонтальную поверхность, - во время взвешивания избегайте резких движений и покачиваний
	Не соблюдены обязательные условия взвешивания	
Весы автоматически отключаются	Сработала система автоматического отключения весов	Весы автоматически отключаются по окончании работы с ними

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Polaris PWS 1860DGF – весы настольные бытовые электронные торговой марки Polaris
Максимальный измеряемый вес: 180 кг
Наименьший предел взвешивания: 5 кг
Цена деления: 0,1 кг
Питание: 2 x 1.5V AAA (батарейки входят в комплект)

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия: **3 года**

Гарантийный срок: **36 месяца со дня покупки**

Информация о месяце и годе изготовления указана на паспортной табличке на приборе.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
Блок 1801, 18/Ф, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение/комната 13, Тел. +7 (495) 419-12-56
Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе:

НИНБО ПУТИАН ИНФОРМЭЙШИН ИНДАСТРИ КО., ЛТД
Индастри Девелопмент Ареа, Дитанг Таун, Город Юйяо, Чжэцзян, Китай
NINGBO PUTIAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD
Industry Development Area, Ditang Town, Yuyao City, Zhejiang

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Весы настольные электронные

Модель: PWS 1860DGF

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке или на дне изделия.

МАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	21
Пайдалану саласы	22
Жиынтықтама	22
Жұмыс істеу қағидаты	22
Аспаптың сипаттамасы	23
Дисплейдің сипаттамасы	24
Жұмысқа дайындау және пайдалану	24
Қуат беру элементтерін орнату	24
Өлшеу бірлігін таңдау	25
Қарапайым өлшеу	25
Майдың/судың/бұлшықет пен сүйек массасының/дене массасының индексінің пайызын анықтау	26
1. Жеке деректерді енгізу	26
2. Өлшеулерді бастау	27
3. Пайдаланушыны автоматты түрде тану Өлшемдер құрал жадында сәйкес пайдаланушы кодымен сақталады	30
4. Өлшеуді қайталап оқу	31
Қателер туралы хабарламалар	31
Тазалау және күтім	32
Тасымалдау және сақтау	32
Кәдеге жарату бойынша талаптар	33
Ақаулықтар және оларды жою	33
Техникалық сипаттамалары	33
Өткізу	34
Сертификаттау туралы ақпарат	34
Кепілдікті міндеттемелер	35

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.



ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Артық салмақ талдағышты қолдану қарсы көрсетілген:
 - Жүкті әйелдерге;
 - Қондырылған электрлік жүрек ширатқышы бар тұлғаларға, өйткені аспаптың әрекет ету қағидасы адам денесі арқылы жүрек ширатқыш жұмысында іркіліс тудыра алатын әлсіз электр тогының ағуына негізделген;
 - Диализбен емдеуден өтетін тұлғаларға.
 - Ісінуден азап шегетін тұлғаларға
 - Қолданар алдында дәрігерден кеңес алу ұсынылады.
- Аспапты тек қана мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Таразыны тегіс қатты, құрғақ және тайғанамайтын көлденең бетке орналастырыңыз. Өлшеген кезде қателікке жол бермеу үшін таразыны линолеумда немесе кілемді жабындардың үстінде пайдаланбаңыз.
- Платформаның ылғалды беті тайғанақ болуы мүмкін – пайдаланар алдында таразыны құрғақ матамен сүртіп алыңыз.
- Таразыны ылғалдылығы жоғары (80%-дан астам) үй-жайларда пайдалануға және сақтауға тыйым салынады, таразының ішіне судың немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз, өйткені бұл оның сынуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты құлаудан және соққылардан сақтандырыңыз.
- Тензадатчиктердің бұзылуына жол бермеу үшін – платформаға секірмеңіз және таразыға ауыр заттарды лақтырмаңыз. Таразыға абайлап, сақтықпен басыңыз.
- Өлшенер алдында аяқ киім мен ұйықтарды шешіңіз, өлшеуді таразыға жалаң аяқпен тұрып жүргізіңіз.
- Өлшеу жүргенше таразыда қозғалмай тұрыңыз.
- Таразыны жылытқыш аспаптардан және қатты электромагниттік сәулеленулерден алыстатып пайдаланыңыз.
- Таразыны ұзақ кезең бойы пайдаланбағанда қуат беру элементтерін батареялық бөліктен алып қою қажет.
- Таразыны өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тыйым салынады. Ақаулықтар анықталғанда авторландырылған (үкілетті) орталыққа жүгініңіз.
- Пайдаланылған батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар кәдеге жаратылуы қажет.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғы коммерциялық немесе медициналық мақсаттарда пайдалану үшін арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.
- Аспаптың негізгі қызметі болып ересек адамның (алты жастан үлкен) салмағын тұрғын үй-жайдың температурасы мен ылғалдылығында анықтау табылады.
- Үй-жайлардан пайдалану қарастырылмаған.
- Ағзадағы майдың көрсеткіштері күн ішінде өзгеруі мүмкін екендігін ескеру қажет (ваннаға немесе душқа түскеннен кейін, тамақ немесе сусын ішкеннен кейін, ауырған кезде немесе дене жүктемелерінде).

ЖИЫНТЫҚТАМА

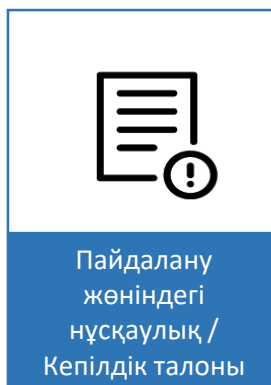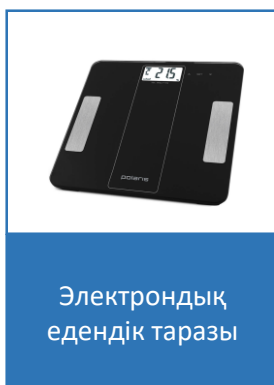

ЖҰМЫС ІСТЕУ ҚАҒИДАТЫ

Осы таразы жұмысының негізінде биоэлектрлік кедергіні талдау қағидаты (B.I.A.) жатыр. Адам ағзасындағы әртүрлі тіндердің пайыздық арасалмағын анықтау адам сезбейтін қауіпсіз төменвольтты электр тогының көмегімен жүргізіледі. Адам ағзасындағы әртүрлі тіндердің әртүрлі электр өткізгіштіктері болады: бұлшықет тіндері мен су үшін жақсы электр өткізгіштік сипатты, сүйектер мен майлы тіндер төмен электр өткізгіштікпен сипатталады. Сөйтіп, электр кедергісін өлшеу нәтижесін, адам ағзасының бірқатар көрсеткіштерін және адамның жеке сипаттамаларын (жасы, бойы, жынысы) пайдалана отырып, май тінінің пайыздық мөлшерін және адам денесінің басқа параметрлерін анықтауға болады.


Осы таразына пайдаланғанда алған мәндер болжалды, дәл емес деректер болып табылатынын есте сақтау қажет.

Мысалы, бұлшықет тінінің құрамында ағзадағы бұлшықет тінін өлшеу кезінде ескерілетін судың белгілі бір пайызы бар, бұл өлшенген тіндердің жалпы пайызы 100% - дан астам құратынына әкелуі мүмкін. Денедегі тіндердің арақатынастарының дәл өлшенуін тек маман дәрігер, бірқатар медициналық зерттеулер мен талдаулар жүргізіп (мысалы, компьютерлік томография арқылы), орындай алады.

Анық емес нәтижелер пайда болуы мүмкін:


- ыстығы бар, ісінуден және остеопороздан азап шеккен адамдарда,
- диализбен емделіп жүрген адамдарда,
- жүрек-тамырлық препараттарды қабылдайтын адамдарда
- жүкті әйелдерде
- кәсіби спортшыларда

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

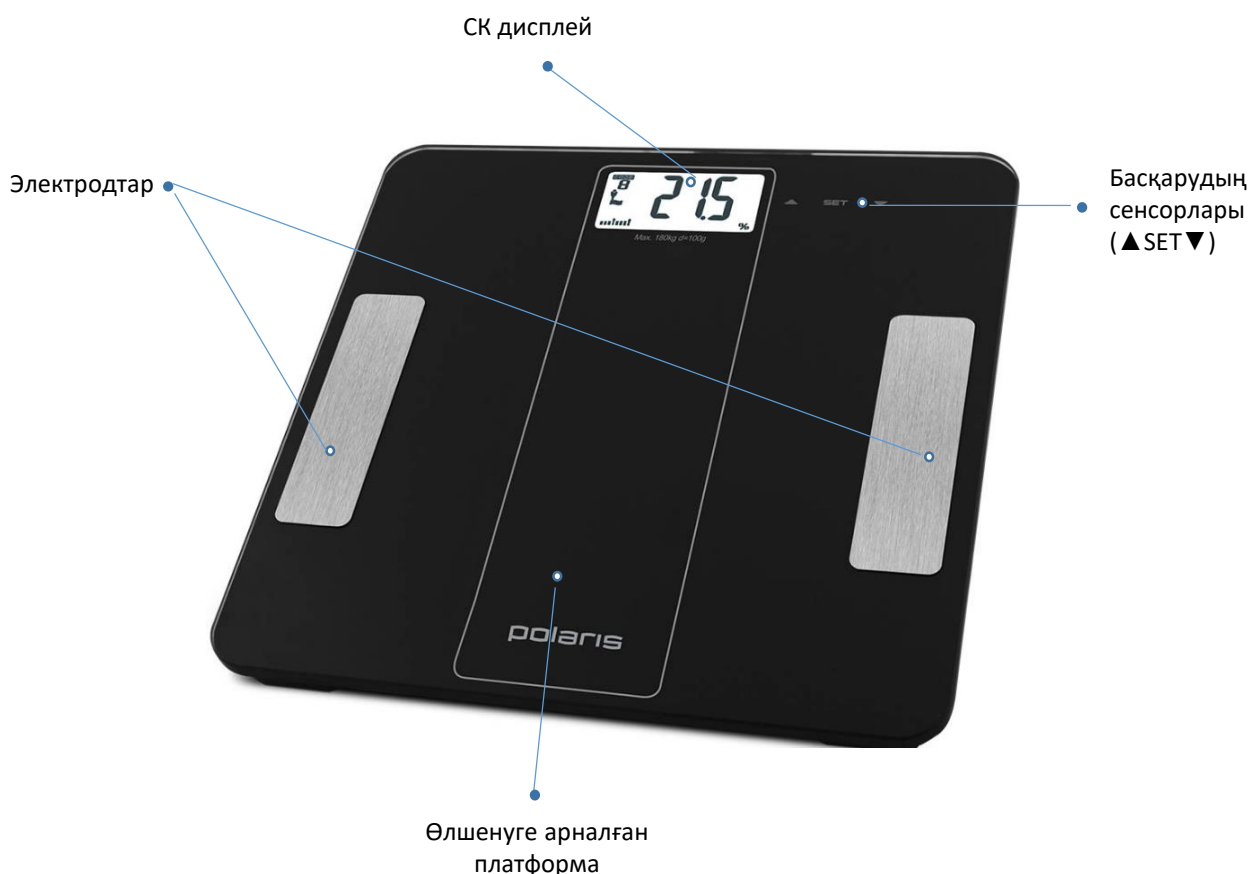

Өлшеу бірлігін таңдау

Салмақ өлшемін (kg – килограмдар, lb – фунттар) өзгерту қажет болса, батареялық бөліктің жанында түпте орналасқан «Unit» батырмасын пайдаланыңыз (салмақ өлшемін таңдау мүмкіндігі бар түрлендірімдер үшін).


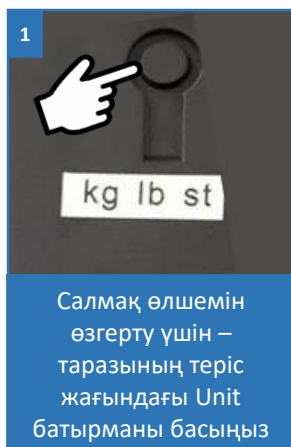


Қарапайым өлшеу

1. Таразыны қатты, көлденең бетке орнатыңыз.
2. Таразының ортасына басыңыз, олар автоматты түрде іске қосылады, дисплейде «0.0» көрсетіледі
3. Таразыға тұрыңыз, бірнеше секундтан кейін дисплейде Сіздің салмағаңыз көрсетіледі.
4. Дисплейдегі цифрлар жыпылықтай бастайды, мән бекітіледі.
5. Платформадан түсінің, таразы бірнеше секундтан кейін автоматты түрде сөнеді.



Назар аударыңыз! Таразы автоматты түрде іске қосылуы үшін жүктеменің салмағы 5кг-нан артық болуы қажет. 5 кг-нан кем салмақ бекітілмейді және дисплейде көрсетілмейді. Егер аспап іске қосылғаннан кейін 25 секунд ішінде өлшеу жүргізілмеген болса, таразы автоматты түрде сөніп қалады.

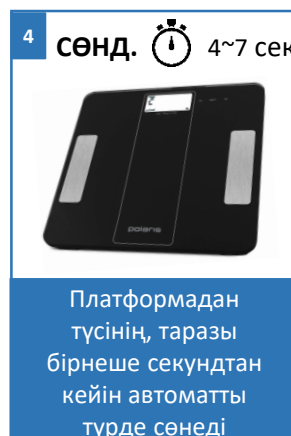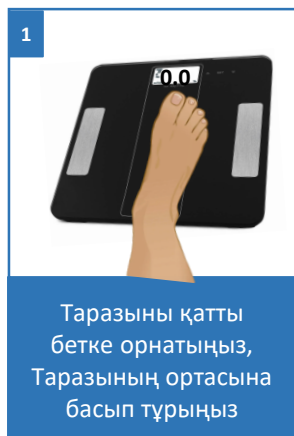

Майдың/судың/бұлшықет пен сүйек массасының/дене массасының индексінің пайызын анықтау

1. Жеке деректерді енгізу

1. Алғашқы іске қосқанда пайдаланушының келесі параметрлері орнатылған

ЖАД	ЖЫНЫС	БОЙЫ	ЖАСЫ
1	Ер	165 см	25 жас


Параметрлер келесі диапазонда таңдалуы мүмкін:

ЖАД	ЖЫНЫС	БОЙЫ	ЖАСЫ
1 - 12 (12 пайдаланушының деректерін енгізуге болады)	Ер Әйел	100 – 250 см	10 – 100 жас

1. Жеке параметрлерді енгізу үшін **SET** сенсорын (дисплейден сол жақта) басыңыз
2. ▲ және ▼ сенсорлармен пайдаланушы кодын (1-ден 10 дейін) таңдаңыз. Мәнді бекітіп, пайдаланушы жынысын орнатуға көшу үшін SET басыңыз.
3. Жынысты таңдау үшін ▲ және ▼ батырмаларды басыңыз. Мәнді бекітіп, пайдаланушы бойын орнатуға көшу үшін SET басыңыз.
4. ▲ және ▼ батырмалардың көмегімен пайдаланушының бойын орнатыңыз. Мәнді бекітіп, пайдаланушы жасын орнатуға көшу үшін SET басыңыз.
5. ▲ және ▼ батырмалардың көмегімен жасты орнатыңыз. Таразы платформасына қол тигізіңіз. Жеке параметрлердің мәндері бекітіледі және дисплейде «0.0» көрсетіледі.
6. Таразы бірнеше секундтан кейін сөнеді.



Ескертпе! Параметрлер арасында ауыстырып-қосу **SET** сенсорының көмегімен жүзеге асырылады.

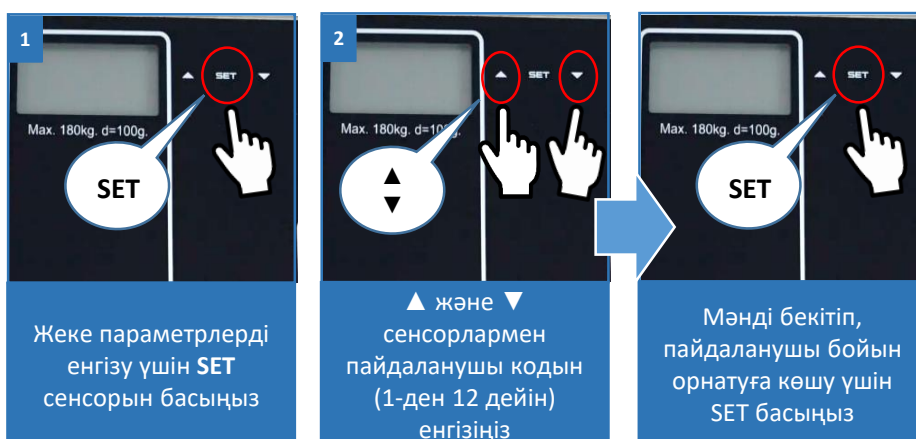

2. Өлшеулерді бастау



Назар аударыңыз! Судың, майдың, бұлшықеттік және сүйек массасының пайыздық мөлшері туралы деректер егер сіз таразыда жалаң аяқ тұрсаңыз ғана алынуы мүмкін.

Мысал: 3-ші пайдаланушы, әйел 168 см, 28 жаста.

1. Таразыны іске қосыңыз. Дисплейде соңғы пайдаланушының параметрлері көрсетіледі.
2. ▲ және ▼ сенсорлардың көмегімен пайдаланушың қажетті нөмірін таңдаңыз. Дисплейде сіздің жеке деректеріңіз жарықпен көрсетіледі.
3. Платформа ортасына қол тигізіңіз, сонда дисплейде «0.0 kg» көрсетіледі.



Ескертпе! Дисплейде «0.0 kg» шыққанша платформаға тұрмаңыз.

4. Екі электродқа жалаң аяқпен тура тұрыңыз.



Назар аударыңыз! Табандарыңыз электродтарды толығымен жабуы қажет!

5. Салмақтың мәні бекітіледі.
6. Дисплей өлшеулердің нәтижелерін орнатып, жазғанша таразыдан түспеңіз. Дисплейге «0000» кескіні шығарылады.
7. Өлшеулерді орнатқаннан кейін СК-дисплей көрсететін болады: Салмақты, Майдың %, Сүйектердің %, Бұлшықеттің % және ұсынылатын калорияларды кезек-кезекпен 3 рет.

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
Таразыны іске қосыңыз. Дисплейде соңғы пайдаланушының параметрлері көрсетіледі	▲ және ▼ сенсорлардың көмегімен пайдаланушың қажетті нөмірін таңдаңыз	Дисплейде сіздің жеке деректеріңіз жарықпен көрсетіледі	Платформа ортасына қол тигізіңіз, сонда дисплейде «0.0 kg» көрсетіледі
 <p>5</p>	 <p>6</p>	 <p>7</p>	 <p>8</p>
Екі электродқа жалаң аяқпен тура тұрыңыз	Салмақтың мәні бекітіледі.	Дисплей өлшеулердің нәтижелерін орнатқанша таразыдан түспеңіз	Дисплейге кескін шығарылады



Ағзадағы судың, майдың, бұлшықеттік және сүйек массасының пайыздық мөлшері - бұл судың, майдың, бұлшықеттік және сүйек массасының жалпы салмаққа қарағандағы пайызбен көрсетілген мөлшері.

Калориялар көрсеткіші Сіздің ағзаңызға арналған күнделікті шығынның ұсынылған деңгейін көрсетеді.

Дисплейде есептелген параметрлер индикацияланғанда дене бітімі типінің индикаторының шкаласында осы параметрлердің осы салмаққа, бойға және жасқа арналған нормаға шамалы сәйкестігі көрсетіледі.

Май массасының % көрсеткіші

Майдың % көрсеткіші адам ағзасындағы майдың % құрамының көрсеткіші болып табылады, ол белгілі бір деңгейде болуы керек, ал майдың артық болуы зат алмасуға кері әсер етеді.

Жұмыс принципі

Белгілі бір жиіліктегі электрлік сигнал адам денесі арқылы өткенде, май массасының қатынасы майдың кедергісі бұлшықеттерге немесе адамның басқа ұлпаларына қарағанда жоғары деген принцип бойынша өлшенеді. Биорезистенттік талдауды қолдану арқылы бұл құрылғы адам денесі арқылы өтетін төмен вольтты электр тогының қауіпсіз жиілігін пайдаланады, сондықтан май % адам ағзасы арқылы берілетін электрлік сигналды беру кезінде қарсылық айырмашылығына сәйкес көрсетіледі.

Май/суды бағалау кестесі

Өлшеуден кейін анықтама үшін келесі бағалау кестесін пайдалануға болады:

ЖАСЫ	ҚАТ	% МАЙ				
		Кемшілік	Жұқа	Норма	Орташада н жоғары	Артық
		i - -	i -	i	i +	i ++
≤ 30	Еркек	≤ 11%	11,1 – 15,5%	15,6-20%	20.1-24.5%	> 24.5%
	Әйел	≤ 16%	16,1-20,5%	20,6-25%	25.1-30.5%	> 30.5%
> 30	Еркек	≤ 15%	15,1-19,5%	19.6-24%	24.1-28.5%	> 28.5%
	Әйел	≤ 20%	20,1-25%	25.1-30%	30.1-35.5%	> 35%

ПҚАТОЛ	ВОЗРЖАСЫСТ	% СҰЙЫҚТАР		
		ҚЫСҚА %	ҚАЛЫПТЫ %	ЖОҒАРЫ %
Еркек	< 40	< 50	50 – 65	> 65
	40 – 60	< 48,5	48,5 – 63,5	> 63,5
	> 60	< 47	47 – 62	> 62
Әйел	< 40	< 45	45 – 60	> 60
	40 – 60	< 43,5	43,5 – 58,5	> 58,5
	< 60	< 42	42 - 57	> 57

* Жоғарыдағы ақпарат тек анықтама үшін берілген

3. Пайдаланушыны автоматты түрде тану Өлшемдер құрал жадында сәйкес пайдаланушы кодымен сақталады.

Таразы өшірілгенде немесе күту режимінде болғанда, таразыға қадам жасаңыз. Егер таразы ұқсас салмақ мәнін анықтай алса (мән айырмашылығы ± 2 кг), СКД салмақ мәнін бір рет жыпылықтап, пайдаланушы кодын көрсетеді.




Таразы ағымдағы пайдаланушыны және оның салмағын, сондай-ақ дене майы, % су және т.б. сияқты басқа деректерді автоматты түрде таниды. Егер пайдаланушыны тану мүмкін болмаса, таразы салмақты көрсетеді және 4-7 секундтан кейін автоматты түрде өшеді. Өлшемдер құрал жадында сәйкес пайдаланушы кодымен сақталады.



Ескерту: Егер баланс екі немесе одан да көп бірдей салмақты тапса, пайдаланушы ең жақын салмақты таңдайды. Егер баланс екі бірдей салмақты тапса, бірінші келген пайдаланушы коды таңдалады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Таразы тек үйде отбасылық пайдалануға арналған, бұл құрылғы кәсіби пайдалануға жарамсыз. Дене салмағы, BMI, дене майының пайызы, су пайызы, бұлшықет массасы, сүйек массасы, стандартты салмақ және майлылық көрсеткіштері тек анықтамалық мақсаттарға арналған. Кез келген диетаны немесе кез келген жаттығу бағдарламасын бастамас бұрын дәрігермен кеңесу керек.

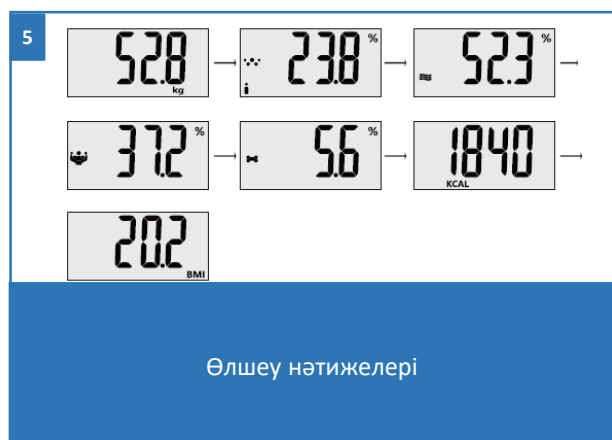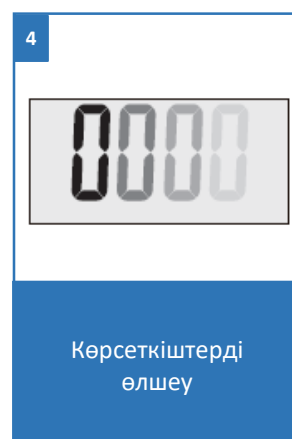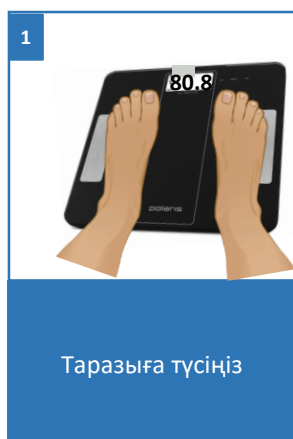


4. Өлшеуді қайталап оқу

Өлшеулер аспап жадында пайдаланушының тиісті кодымен сақталады.

Оларды қайталап оқу үшін:

- SET сенсорына басып, таразыны іске қосыңыз
- ▲ және ▼ сенсорларымен пайдаланушының тиісті кодын таңдаңыз.
- 6 секунд күтіңіз немесе платформаның ортасына басыңыз. Дисплейде «0.0 kg» көрсетіледі.
- өлшеулерді қайталап оқу режиміне көшу үшін ▲ сенсорын басыңыз.
- Өлшеулердің мәндері экранда 3 рет көрсетіледі, содан кейін таразы автоматты түрде сөнеді.

Келесі өлшенгеннен кейін алдыңғы өлшеулердің нәтижелері аспаптың жадынан жойылады.

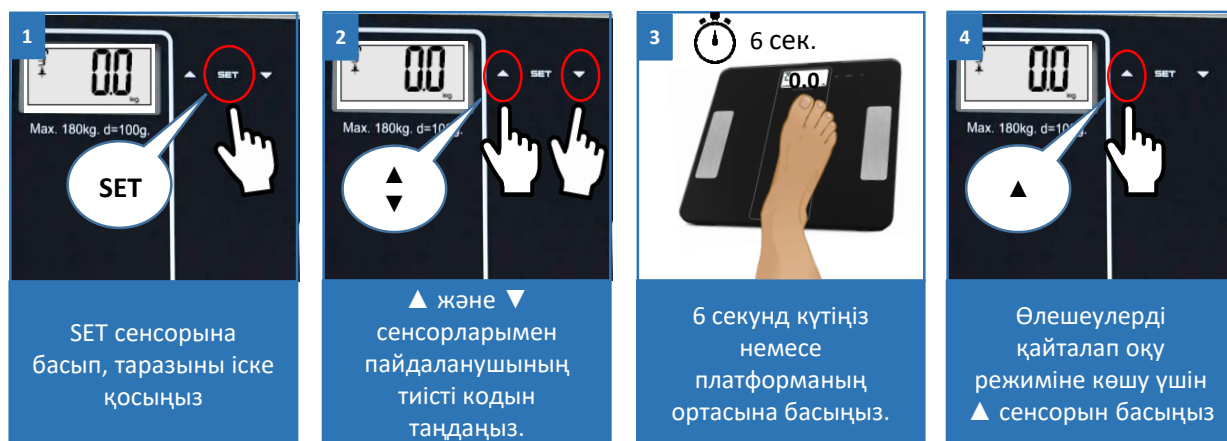

ҚАТЕЛЕР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАЛАР

«LO» - батареяның заряды төмен, батареяны ауыстыру қажет.

«Err» - рұқсат етілген салмақтан артып кету индикаторы. Сынуға жол бермеу үшін платформадан түсу қажет.

« [» - бағдарламаның қатесі. Операцияны тағы бір рет қайталаңыз.

«ErrL» - ағзадағы май массасының тым төмен мөлшерінің индикациясы.

«Errh» - ағзадағы май массасының тым жоғары мөлшерінің индикациясы.


Денсаулықты қолдау үшін емдәмді сақтаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Таразыны тазалау үшін қажақ және химиялық құралдарды қолданбаңыз. Таразыны болымсыз дымқылданған матамен сүртіңіз. Таразыны шүмектің астында жумаңыз және оларды суға батырмаңыз, бұл сынуға әкеледі.
- Таразыны соққылардан, ылғалдан, шаңнан, химиялық заттардан және температураның төтенше ауытқуынан қорғаңыз. Аспапты жылудың көздерінен (пештер, жылыту аспаптары) алыстатып сақтаңыз;
- Таразыны құрғақ салқын жерде көлденең күйде сақтаңыз.
- Сақтау кезінде таразының үстінде ешқандай заттар болмауын қадағалаңыз.
- Ұзақ уақыт сақтағанда таразыдан батареяларды алып қойыңыз.
- Егер аспапты іске қосқаннан кейін экранда ештеңе көрсетілмесе, онда, қажет болса, батареяларды ауыстырыңыз. Егер бұл іс-әрекеттер көмектеспесе, қолдау қызметіне жүгініңіз.



Қажақ және химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Ылғал матамен сүртіп алыңыз

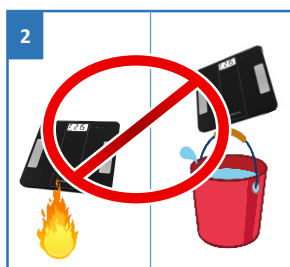

Таразыны сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Таразыны қандай болса да соққылардан қорғаңыз

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес жабық көлік құралдарында көліктің барлық түрлерімен жүргізеді.
- Аспаптарды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушылық ыдыстың сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі тиіс.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар жабық, құрғақ және таза үй-жайда, қоршаған ауаның ылғалдылығы 70%-дан аспайтын, плюс 5°C-ден төмен емес және плюс 40°C-ден аспайтын бөлме температурасында, қоршаған ортада аспаптардың материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.



Ескерту: Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық	Себебі	Ақаулықты жою
Таразы жұмыс істемейді	Таразы іске қосылмаған Қуат беру элементтерін ауыстырыңыз	Таразыны іске қосыңыз
	Қуат беру элементтердің сыйымдылығы аяқталды	Қуат беру элементтерін ауыстырыңыз
Дисплейдің көрсеткіштері шынайы мәнге сәйкес келмейді	Өлшеудің қате бірлігі таңдалған	Сенсордың көмегімен өлшеудің қажетті бірлігін таңдаңыз. Салмақтың дәл мәнін алу үшін бірқатар шарттарды орындау қажет: - таразыны тек қана тегіс көлденең бетке орнатыңыз, - өлшеген кезде шұғыл қозғалыстар мен тербелістерден аулақ болыңыз
	Өлшеудің міндетті шарттары сақталмаған	
Таразы автоматты түрде сөніп қалады	Таразының автоматты түрде сөну жүйесі іске қосылды	Таразы олармен жұмысты аяқтағаннан кейін автоматты түрде сөнеді

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Polaris PWS 1860DGF – Polaris сауда маркасының едендік тұрмыстық электрондық таразы

Максималды салмақ: 180 кг

Өлшеудің ең төмен шегі: 5 кг

Бөліктің шамасы: 0,1 кг

Қуаттану: 2 x 1.5V AAA (батарейкалар жиынтыққа кіреді)

Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2017 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: **3 жыл**

Кепілді мерзімі:

Сатып алған күннен бастап 36 ай

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпарат аспаптың паспорттық тақтайшасында көрсетілген.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
1801, 18/F Блогы, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импорттаушы: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,
Орджоникидзе көшесі, 11-үй,

3-құрылыс, 4-қабат, 13-үй-жай/бөлме, Тел. +7 (495) 419-12-56

Өндірушінің РФ және Кедендік Одақ мүше -елдеріндегі уәкілетті өкілі: "Поларис Инт"
ЖШҚ, Ресей, 105005, Мәскеу қ., 2-ші Бауманская к-сі, 7-үй, 5-құр., 26-бөлме

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

Қытайда жасалған

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрондық едендік таразы

Моделі: PWS 1860DGF

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және Кедендік Одақ мүше мемлекеттерінің

«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына сәйкес кепілді қызмет көрсетуді болжайды.

Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және кепілдікті қызмет көрсету көрсетілетін елдерде өндіруші уәкілеттілік берген сатып

алушылардан сатып алынған барлық модельдерге (сатып алған жерге байланыссыз) қолданылады.

Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.

Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуіне;
- Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
- Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалануна;
- Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
- Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
- Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
- Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
- Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
- Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы немесе түбіндегі паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

